


## DRE Vision Excel

Lampara para Cirugia

Equipo para la manera en que usted opera


**DRE V SERIES** Excel

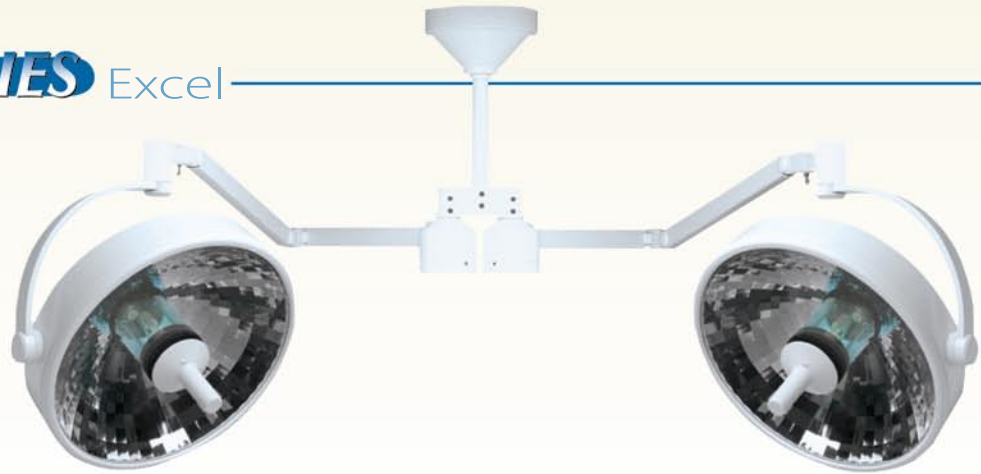

## Un estandar global en la iluminacion medica

La lampara cirujica DRE Vision Excel tiene un diseno con reflector eliptico de 406 mm que reduje sombras. Esta luz tiene un deseno grande y preenfocada que facilita una distribucion de luz homogenea.

La DRE Vision Excel tiene un mango removible montado el el perimetro de la luz para que se le pueda esterilizar.

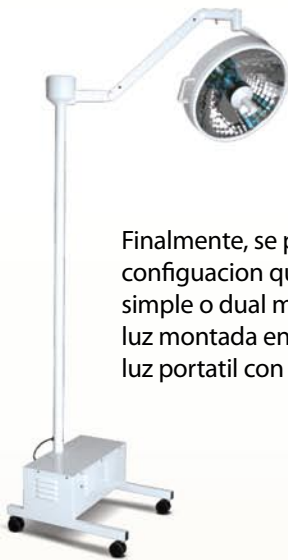

Finalmente, se puede elegir la configuracion que quiere: luz simple o dual montada al techo, luz montada en la pared, o luz portatil con soporte

### ► Un Vistazo Rapido

- Bujias pies de luz: 6,000
- Lux 64,500
- Distancia de foco: 914 mm
- Cilindro de vidrio que absorbe calor y corrige distorciones de color
- Reemplazar bombillas en momentos
- Movimiento suave de las cabezas y brazos de la luz
- Brazos con mecanismo de ballesta de compression ajustable



DRE Vista



DRE Vortex

La vision excel tambien puede ser montada en el techo en combinacion con otras luces de la serie DRE V

**DRE V SERIES**